

# Meeres-Heilschlick

## Medizinprodukt



### Indikation für die heiße Anwendung:

Subakute und chronische Zustände des rheumatischen Formenkreises/ entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen/ Weichteilrheumatismus/ postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat/ funktionelle Durchblutungsstörungen/ entzündungshemmend, durchblutungsfördernd/ regt die Regenerationskräfte der Haut an.

### Heiße Anwendung:

Auflegen der nicht erwärmten Schlickpackung mit der Vlies-Seite auf die Haut. Soweit nicht anders verordnet liegt die Anwendungstemperatur bei zwischen 42° und 48° Celsius; entsprechend ist der aufgelegte optionale Thermospeicher (Wärmeträger) auf 55° bis 60° Celsius zu erwärmen. Achten Sie auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem erhitzten Wärmeträger! Anwendungsdauer: ca. 20 bis 30 Minuten




### Indikation für die kalte Anwendung:

Akute Zustände des rheumatischen Formenkreises/ entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen/ Weichteilrheumatismus/ akute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat/ Unterstützung der Therapie bei Venen- und Lymphgefäßentzündungen/ Unterstützung der Therapie zur Fiebersenkung/ entzündungshemmend, durchblutungsfördernd/ regt die Regenerationskräfte der Haut an.

### Kaltanwendung:

Auflegen der nicht gekühlten Schlickpackung mit der Vlies-Seite auf die Haut. Der optionale Thermospeicher (Wärmeträger) wird bei der Kaltanwendung nicht erhitzt, sondern im Kühlschrank auf ca. 3° bis 4° Celsius gekühlt und auf die nicht gekühlte Schlickpackung gelegt. Achten Sie auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem gekühlten Wärmeträger! Anwendungsdauer : ca. 10-15 Minuten

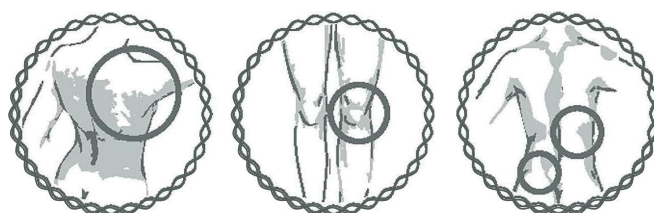

### Kontraindikation:

Wärme: Akute Entzündungszustände/ akute Zustände nach Traumen, Blutungen, Ödemen, Durchblutungsstörungen feiner und größerer Hautgefäße/ Fieberzustände/ Hautareale mit Sensibilitätsstörungen/ großflächige Hautverletzungen und akute Hautkrankheiten/ wärmebedingte Nesselausschläge  
Kälte: Durchblutungsstörungen feiner und größerer Hautgefäße/ kältebedingte Nesselausschläge/ kältebedingte Globulinanhäufung/ großflächige Hautverletzungen.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Besonders bei Heiße Anwendungen muss eine sorgfältige Temperaturkontrolle des Thermospeichers (optionaler Wärmeträger) vor Applikationen erfolgen, da ansonsten Verbrennungsgefahr besteht. Die Gebrauchsanweisung der Wärmeträger sind zu beachten. Der heiße Wärmeträger darf nicht direkt mit dem Körper des Patienten in Kontakt kommen. Packung bitte nicht knicken. Bei Rissbildung können Schlickteile ausbrechen und es entstehen freie Stellen ohne Schlickpaste. Vor der Applikation ist die Schlickpackung zu kontrollieren, wobei keine „freien Stellen ohne Schlick“ vorhanden sein dürfen, da sonst Verbrennungsgefahr besteht.

### Medikamentöse und sonstige Wechselwirkungen:

Bei Heiße Anwendung zusammen mit lokal hyperämisierenden Substanzen ist mit Reizwirkungen auf der Haut zu rechnen.



# Meeres-Heilschlick

## Medizinprodukt

### Zweckbestimmung:

Die Meeres-Schlickpackungen sind nicht-invasive Medizinprodukte der Risikoklasse I gemäß Regel 1 Anhang VIII der MDR (2017/745). Diese Produkte werden zur äußerlichen Anwendung genutzt und dienen der thermischen Behandlung sowie der Unterstützung von Haut- und Muskelfunktionen. Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe konkret Heilschlick ist für seine positiven Wirkungen auf Durchblutung, Entspannung und Hautpflege bekannt. Die Produkte werden als physikalische Therapiehilfen zur Wärme- und Kälteanwendung, zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Unterstützung der Hautpflege sowie zur Förderung der Durchblutung eingesetzt. Das Produkt ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie zur Anwendung durch informierte Laien im häuslichen Umfeld geeignet.

### Handelsname:

Meeres Schlickpackung 30 x 40 cm, 400 gr

### Inhaltsstoffe:

Chlorid, Magnesium, Calcium, Kalium, Phosphor, Schwefel, Algenextrakte, Meersalz und Spurenelemente.

### Was müssen Sie vor der Anwendung von der Meeres Schlickpackung beachten?

Prüfen Sie, ob eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion gegen Schlick vorliegt.

### Welchen Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Personen mit hohen allergischen Potential gegen Mineralsalze könnte es in seltenen Fällen zu Hautirritationen kommen (Rötung oder Juckreiz). Sollten Nebenwirkung auftreten, empfehlen wir einen Arzt oder Apotheker zu kontaktieren.

### Warnhinweise:

Warnhinweise zu bestimmten Inhaltsstoffen der Meeres Schlickpackungen sind nicht bekannt. Die Meeres Schlickpackungen nach dem Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde zu melden.

### Hinweis auf Anbruch:

Nach Anbruch des Artikels Packung nicht über +25 Grad lagern, schützen Sie die Packung vor Hitze und Licht. Nach Möglichkeit Packung im Kühlschrank nicht unter 0 Grad, frostfrei, lagern. Die Packung sollte innerhalb von 1 Woche aufgebraucht werden. Vor Hitze und Licht schützen.

### Hinweise für Entsorgung:

Für Privatpersonen / Für Privathaushalte:

Der Heilschlick kann im Garten ökologisch entsorgt werden. Kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Für Kliniken / Krankenhäuser / Physiotherapeutische Praxen:  
Abfallentsorgung ohne besondere Anforderung  
(Nicht infektiöser Klinikmüll)

### Zeichenerklärung:



Chargen-  
bezeichnung




Medizin-  
produkt



Vor Anwendung  
Gebrauchsinformation  
lesen



Verwendbar  
bis

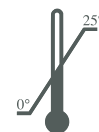

Lager-  
bedingungen